




환영합니다!

Cologuard®와 함께 대장암 검사를
준비해보세요

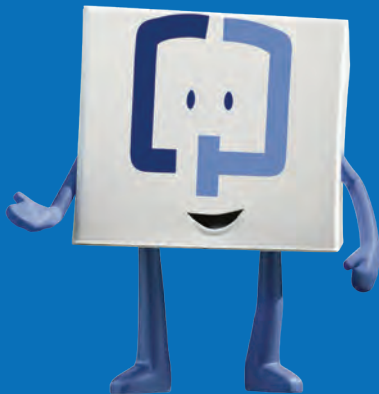

내용 보기:

- 「검진의 중요성
- 「Cologuard 소개
- 「유용한 정보
- 「채취 키트 사용 및 반송하기
- 「결과 이해하기

Cologuard는 평균적인 대장암 위험이 있는 45세 이상 성인을 검사하기 위한 것입니다. Rx 전용.
책자 뒷면에 나와 있는 중요한 위험 정보를 참조하세요.

대장암 검사를 하는 이유는?

제때 정기적으로 검진하는 것이 큰 차이를 만들 수 있습니다

- 조기에 발견하면 90%의 경우 치료 가능성이 더 높습니다*1
- 검진은 45세 이상 성인의 대장암을 발견하는데 중요한 단계입니다²

*5년 생존 기준.

참고문헌

1. National Cancer Institute. SEER cancer stat facts: colorectal cancer. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html>. 2020년 2월 5일 접속.

2. American Cancer Society. Can colorectal cancer be prevented? <https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/causes-risks-prevention/prevention.html>.

마지막 개정일: 2018년 5월 30일. 2020년 2월 3일 접속.


Cologuard 키트가 지금 오고 있는 중입니다

잘하셨습니다! 여러분과 담당 의료 제공자는 효과적이고 비침습적인 검진 옵션인 Cologuard를 이용해 대장암 검사를하기로 결정하셨습니다

Cologuard 키트가 집으로 배송되면:

- ┌ 바로 열어서 무엇이 들어있는지 확인합니다
- ┌ 바로 사용해야 한다는 것을 기억할 수 있도록 Cologuard 키트를 화장실에 놓으십시오
- ┌ 동봉된 설명서를 읽습니다
- ┌ Cologuard 키트를 사용해 가능한 빨리 대변 표본을 제공해야 합니다

책자 뒷면에 나와 있는 중요한 위험 정보를 참조하세요.

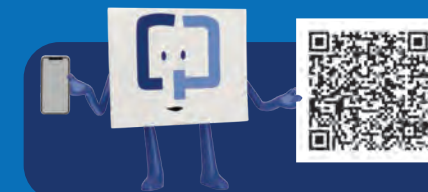

도와드립니다!

사용 방법(How to Use)
동영상을 보려면 스캔하세요
CologuardTest.com/use

Cologuard는 효과적입니다

대변에서 변형된 DNA와 혈액을 검출해 대장암을
찾아냅니다



Cologuard는 초기
단계에서도 **92%의 암을**
찾아냅니다¹

45~49세 성인에서의 Cologuard 성능은 50세 이상 환자의 대규모 임상시험을 기반으로 추정된 것입니다. 이 임상시험에서 암이 없는 사람 중 13%가 양성 결과(위양성)를 받았고 암이 있는 사람 중 8%가 음성 결과(위음성)를 받았습니다.

책자 뒷면에 나와 있는 중요한 위험 정보를 참조하세요.


참고문헌

1. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening. *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297.

Cologuard는 편리합니다

Cologuard는 비침습적이고 사용이 간편합니다.
꽤 괜찮죠?

- 「 특별한 준비가 필요 없습니다. 휴가를 낼 필요도 없습니다. 식이요법이나 약물을 바꿀 필요도 없습니다
- 「 집으로 배송됩니다
- 「 자택의 개인 공간에서 표본을 채취합니다

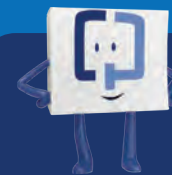

기다리지 마세요!
Cologuard 키트를 받으면
바로 검사하세요

시작하기 전 유용한 정보



상자를 버리지 마세요

표본을 돌려보낼 때 상자를 다시 사용하게 됩니다. 그러니 버리지 마세요!

내부 봉투를 벗기지 마세요


표본을 다시 돌려보낼 때 새는 것을 방지합니다. 제거하지 마세요.

날짜를 확인합니다

시작하기 전에 충분한 배송 시간을 확보할 수 있도록 채취 후 24시간 이내에 표본을 배송할 수 있어야 합니다. 일요일이나 휴일로 인해 배송이 지연되지 않도록 해야 합니다.

몸이 좋지 않습니까?

설사를 하거나 혈뇨 또는 혈변(예시: 출혈, 치핵, 손 부위 상처 또는 자상, 생리혈)이 있는 경우 표본을 채취하지 말아야 합니다.

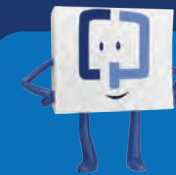

연락하세요!

연중무휴 24시간 도움을
받을 수 있습니다

1-844-870-8870

Cologuard 키트 사용 방법



1 Cologuard 키트를 받으면 포장을 뜯습니다.
유통기한을 확인하고 그 전에 사용합니다



2 표본 용기를 변기 받침대에 놓습니다



3 Cologuard 키트를 사용해 표본을 채취합니다



4 표본을 긁어낸 다음 표본 용기에 방부제와
함께 채웁니다

내용물은 무엇이 있나요? 필요한 모든 것이 들어 있습니다.



배송 박스



튜브



액상 방부제



표본 용기




받침대




환자 안내서



표본 라벨

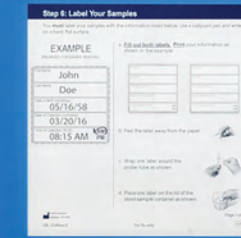


표본 라벨

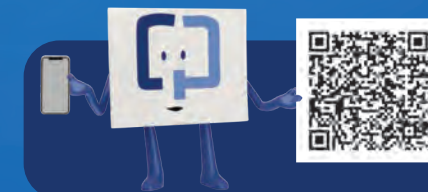

사용하기 간편합니다!


사용 방법(How to Use) 동영상을
보시려면 스캔하거나 웹 사이트를
방문하세요

CologuardTest.com/use



다 끝나고 나면
어떻게 해야 하나요

- ☑ 상자를 Exact Sciences Laboratories로 24시간 이내에 배송합니다
- ☑ 키트에 있는 선납 UPS 라벨을 이용하세요
- ☑ UPS 장소에 표본을 전달하거나 UPS나 Exact Sciences Laboratories 고객 관리 센터에 연락해 수거 일정을 예약하세요
- ☑ 즐거운 하루를 보내세요!

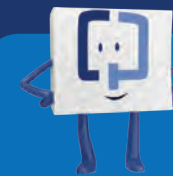

결과는 2주 안에!

결과는 의료 제공자에게 자동으로 발송됩니다. 좋습니다.

결과 이해하기

의료 제공자는 검진 결과에 관해 보통 **2주 이내**에 연락을 드립니다

+ 양성 결과

검사에서 전암 폴립증이나 대장암을 일으킬 수 있는 변형된 DNA나 혈액을 발견했습니다.

모든 양성 결과는 의료 제공자와 논의하고 후속 대장 내시경 검사를 받아야 합니다.

위양성 결과가 나타나기도 합니다. 대장 내시경 검사 결과 암 또는 전암 폴립증이 발견되지 않더라도 Cologuard 검사 결과가 양성이면 위양성 결과가 발생합니다.

— 음성 결과

검사에서 전암 폴립증이나 대장암을 일으킬 수 있는 변형된 DNA나 혈액을 발견하지 못했습니다.

위음성 결과가 나타나기도 합니다. 대장 내시경 검사 결과 양성으로 확인되더라도 Cologuard 검사 결과 전암 폴립증 또는 대장암을 발견하지 못하면 위음성 결과가 발생합니다.

미국 암협회(American Cancer Society)에서는 음성 결과 후 **3년마다** Cologuard 검진할 것을 권장하고 있습니다¹


참고문헌

1. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin.* 2018;68(4):250-281.

보험이 있는
환자 대부분은
\$0*를
지불합니다

Cologuard는 Medicare를 비롯한 대부분의 주요 보험회사에서 보장합니다

전국적으로 Cologuard 환자의 94% 이상이 개인 부담
비용을 지출하지 않습니다.*

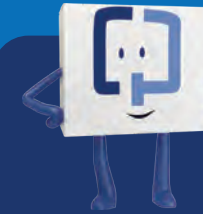

보장에 대한 질문이 있으니까?


Cologuard 전문가팀이 도와드릴 수
있습니다.

전화: **1-844-870-8870** 또는 웹 사이트:
CologuardTest.com/insurance

*보장률은 주 및 지역마다 다릅니다. 보장률은 Cologuard 검진 집단에만 적용됩니다.

한 번 해보세요!

- ┌ Cologuard 키트는 전체 설명서와 함께 제공됩니다
- ┌ 필요할 경우 사용 방법(How to Use) 동영상을 볼 수 있습니다
CologuardTest.com/use
- ┌ 24시간 연중무휴 대기하고 있습니다. **1-844-870-8870**번으로 연락하세요
- ┌ 이 가이드는 CologuardTest.com/WelcomeGuide에서
다른 언어로도 다운로드하실 수 있습니다

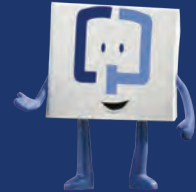

Cologuard는 대변에서 특정 DNA 마커와 혈액을 검출하여 평균적인 대장암의 위험을 가지고 있는 45세 이상의 성인을 검사하기 위한 것입니다. 선종이 있거나 염증성 장질환 및 특정 유전성 증후군이 있거나 대장암에 대한 개인 병력 또는 가족력이 있는 경우 사용하지 말아야 합니다. Cologuard는 고위험 환자의 대장 내시경 검사를 대신하지 않습니다. 45~49세 성인에서의 Cologuard 성능은 50세 이상 환자의 대규모 임상시험을 기반으로 추정된 것입니다. 반복 검사에서 Cologuard 성능은 평가되지 않았습니다.

Cologuard 검사 결과는 주의해서 해석해야 합니다. 양성 검사 결과가 암이 있다는 것을 확정하는 것은 아닙니다. 양성 검사 결과가 나온 환자는 대장 내시경 검사 진단을 받아야 합니다. 음성 검사 결과가 암이 없다는 것을 확정하는 것은 아닙니다. 음성 검사 결과가 나온 환자는 언제 다시 검사를 받아야 하는지 의사와 상의해야 합니다. 위양성 및 위음성 결과가 나타날 수 있습니다. 임상시험에서 암이 없는 사람 중 13%가 양성 결과(위양성)를 받았고 암이 있는 사람 중 8%가 음성 결과(위음성)를 받았습니다. Rx 전용.

**EXACT
SCIENCES**

EXACT SCIENCES CORPORATION 441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
www.ExactSciences.com | www.ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard는 Exact Sciences Corporation의 등록 상표입니다.
©2020 Exact Sciences Corporation. 당사가 모든 권리를 보유합니다. US.CG.2862-2020년 2월 1일

 **cologuard**[®]
Rx only