




¡Bienvenido!

Preparémonos para la **prueba de detección** de cáncer de colon conmigo, Cologuard®

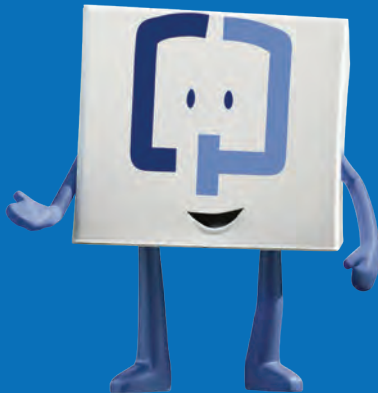

Un vistazo al contenido:

- ┌ La importancia de las pruebas de detección
- ┌ Sobre Cologuard
- ┌ Consejos útiles
- ┌ Uso y devolución de su kit de recolección
- ┌ Entender sus resultados

Cologuard está diseñado para usarse como prueba de detección en adultos mayores de 45 años con riesgo promedio de padecer cáncer colorrectal. Venta con receta únicamente.

Vea la información importante sobre los riesgos al dorso del folleto.

¿Por qué hay que hacerse las pruebas de detección de cáncer colorrectal?

Las pruebas de detección regulares y oportunas pueden hacer una gran diferencia.

- Cuando se detecta en las etapas iniciales, es más tratable en un 90 % de las personas.*¹
- Las pruebas de detección son un paso importante para detectar el cáncer de colon en adultos mayores de 45 años.²

*Basado en una supervivencia de 5 años.

REFERENCIAS

1. Instituto Nacional del Cáncer. Información estadística de SEER sobre el cáncer: cáncer colorrectal. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html>.

Acceso: 5 de febrero de 2020.

2. Sociedad Americana Contra el Cáncer. ¿Se puede prevenir el cáncer colorrectal? <https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/causes-risks-prevention/prevention.html>. Última revisión: 30 de mayo de 2018. Acceso: 3 de febrero de 2020.


Su **kit** Cologuard está en camino.

¡Buen trabajo! Usted y su proveedor de atención médica decidieron cáncer de colon Cologuard detección de cáncer de colon, una opción eficaz y no invasiva.

Cuando reciba el kit Cologuard en su casa:

- ┌ Ábralo de inmediato para ver qué contiene.
- ┌ Coloque su kit Cologuard en el baño para recordar usarlo de inmediato.
- ┌ Lea las instrucciones adjuntas.
- ┌ Use su kit Cologuard para dar una muestra de heces tan pronto como pueda.

Vea la información importante sobre los riesgos al dorso del folleto.

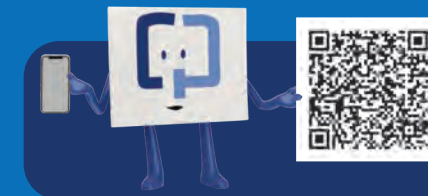

¡Déjeme ayudarlo!

Busque y vea el video
Cómo usar Cologuard® en
CologuardTest.com/use.

Cologuard es **eficaz**

Detecta el ADN alterado y sangre en las heces para ayudar a detectar el cáncer de colon.



Cologuard detecta un 92 % de los casos de cáncer, incluso en las etapas iniciales.¹

El rendimiento de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima sobre la base de un amplio estudio clínico de pacientes mayores de 50 años. En un estudio clínico, el 13% de las personas sin cáncer recibió un resultado positivo (falso positivo) y el 8% de las personas con cáncer recibió un resultado negativo (falso negativo).

Vea la información importante sobre los riesgos al dorso del folleto.

REFERENCIA

1. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening (Pruebas de ADN en heces con objetivos múltiples para la detección de cáncer colorrectal). *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297.

Cologuard es **conveniente**

Cologuard no es una prueba invasiva y es fácil de usar. Bastante bien, ¿verdad?

- ┌ No se necesita una preparación especial. No es necesario ausentarse del trabajo. No es necesario cambiar la dieta ni los medicamentos.
- ┌ Se le entrega en su casa.
- ┌ Usted recolecta su muestra en la privacidad de su casa.



¡No espere!

Hágase la prueba cuando reciba su kit Cologuard.

Consejos útiles antes de empezar



▮ **Guarde la caja**

La usará para enviar su muestra. ¡No la tire!

▮ **Deje adentro la bolsa interior**

Ayuda a contener las fugas cuando envíe la muestra. No la quite.

▮ **Revise su calendario**

Antes de empezar, asegúrese de que pueda enviar su muestra en un plazo de 24 después de recolectarla para permitir suficiente tiempo de entrega. Entonces, asegúrese de que un domingo o un feriado no retrasará su envío.

▮ **¿No se siente bien?**

No recolecte su muestra si ha tenido diarrea o sangre en la orina o las heces (por ejemplo, por sangrado, hemorroides, cortadas o heridas en las manos, o menstruación)



¡Llámenos!

Podemos ayudarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana al **1-844-870-8870**

Cómo **usar** su kit Cologuard



1

Reciba y desempaque su kit Cologuard. Revise la fecha de vencimiento y úselo antes de esa fecha.



2

Coloque el recipiente para la muestra en el soporte del inodoro.



3

Use su kit Cologuard para recolectar su muestra.



4

Raspe la muestra, luego llene el recipiente para la muestra con conservante

¿Qué hay **adentro**? Exactamente lo que necesita.



Caja de envío



Tubo



Conservante líquido



Recipiente para la muestra




Soporte




Instrucciones de la Guía para el paciente



Etiquetas para la muestra

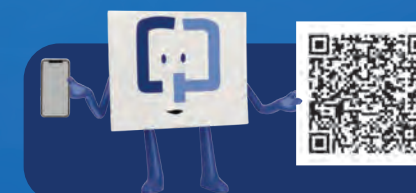


¡Soy fácil de usar!
Busque y vea el video
Cómo usar Cologuard®, o visite
CologuardTest.com/use.



¿Qué debe **hacer**
cuando termine?

- ✓ Envíe su caja a Exact Sciences Laboratories **en las próximas 24 horas.**
- ✓ Use la etiqueta prepagada de UPS incluida en el kit.
- ✓ Lleve su muestra a una oficina de UPS o llame a UPS o al centro de atención al cliente de Exact Sciences Laboratories para programar cuándo a retirar la muestra.
- ✓ ¡Disfrute su día!

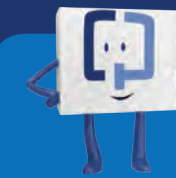

¡Resultados en 2 semanas!

Automáticamente se enviarán los resultados a su proveedor de atención médica. Qué bien.

Entender sus **resultados**

Su proveedor de atención médica se comunicará con usted para darle los resultados de la prueba de detección, generalmente en **2 semanas**.

+ Resultado positivo

La prueba detectó ADN alterado o sangre que podría aparecer a causa de un pólipo precanceroso o cáncer de colon.

Debe hablar con su proveedor de atención médica sobre cualquier resultado positivo y dar seguimiento con una colonoscopia de diagnóstico.

Sí, puede haber resultados falsos positivos. Un resultado se considera falso positivo cuando se obtiene un resultado positivo con Cologuard aunque no se encuentre cáncer ni pólipos precancerosos con la colonoscopia.

— Resultado negativo

La prueba no detectó ADN alterado ni sangre que podría aparecer a causa de un pólipo precanceroso o cáncer de colon.

Sí, puede haber resultados falsos negativos. Un resultado falso negativo ocurre cuando Cologuard no detecta ADN alterado ni sangre que pudiera ser causa de un pólipo precanceroso o cáncer de colon aun cuando una colonoscopia identifica el resultado positivo.

La Sociedad Americana Contra el Cáncer recomienda hacer las pruebas de detección **cada 3 años** con Cologuard después de haber obtenido un resultado negativo.¹


REFERENCIA

1. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society (Pruebas de detección de cáncer colorrectal para adultos con riesgo promedio: actualización de la directriz de 2018 de la Sociedad Americana Contra el Cáncer). CA Cancer J Clin. 2018;68(4):250-281.

La mayoría
de los
pacientes
asegurados
pagan **\$0.***

Cologuard está **cubierto**
por Medicare y la mayoría
de las aseguradoras más
importantes.

A nivel nacional, más del 94 % de los pacientes que usan Cologuard no tienen que pagar costos de desembolso directo por la prueba de detección.*

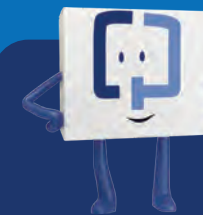


¿Preguntas sobre la cobertura?

Nuestro equipo de especialistas puede ayudarlo: llame al **1-844-870-8870** o visite **CologuardTest.com/insurance**.

*La tasa de cobertura varía según el estado y la región. La tasa de cobertura solo corresponde a la población que se hizo la prueba de detección Cologuard.

¡Hagamos esto!

- ┌ Su kit de Cologuard incluye instrucciones completas.
- ┌ El video Cómo usar Cologuard® está disponible cuando lo necesite en CologuardTest.com/use.
- ┌ Estamos aquí para ayudarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, llámenos al **1-844-870-8870**.
- ┌ También puede descargar (download) esta guía en otros idiomas, en CologuardTest.com/WelcomeGuide.

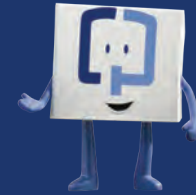

Cologuard está diseñado para usarse como prueba de detección en adultos de mayores de 45 años que tengan un riesgo promedio de padecer cáncer colorrectal. Cologuard permite la detección de ciertos marcadores de ADN y sangre en las heces. No lo use si ha tenido adenomas, tiene enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios, o antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal. Cologuard no es un reemplazo de la colonoscopia en pacientes de alto riesgo. La eficiencia de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima con base en un gran estudio clínico de pacientes de mayores de 50 años. No se evaluó la eficiencia de Cologuard cuando se utiliza para pruebas repetidas.

Los resultados de la prueba Cologuard deben interpretarse con precaución. Un resultado positivo no confirma que haya cáncer. A los pacientes con un resultado positivo en la prueba se los debe derivar para que se hagan una colonoscopia de diagnóstico. Un resultado negativo no confirma que no haya cáncer. Los pacientes con un resultado negativo en la prueba deben hablar con su médico sobre cuándo deben volver a hacerse la prueba. Existen falsos positivos y falsos negativos. En un estudio clínico, el 13 % de las personas sin cáncer recibió un resultado positivo (falso positivo) y el 8 % de las personas con cáncer recibió un resultado negativo (falso negativo). Venta con receta únicamente.

**EXACT
SCIENCES**

 **cologuard**[®]
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
www.ExactSciences.com | www.ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard es una marca registrada de Exact Sciences Corporation.
©2020 Exact Sciences Corporation. Todos los derechos reservados. US.CG.2862-1-Febrero-2020